

## en OPERATING YOUR SMARTLINKO2 APP

### 1. Download SmartLinkO2 App onto your smartphone



Apple App Store



Google Play App Store



SmartLinkO2 App

### 2. Turn on Bluetooth® in your Smartphone Settings



Apple Settings App



Android Settings App



Bluetooth


### 3. Plug in Your iGo2® POC




### 4. Open SmartLinkO2 App

- Register Your Account.
- Enter your information including desired password and click Register or Sign In to your existing account.

New User or Existing Account Screen

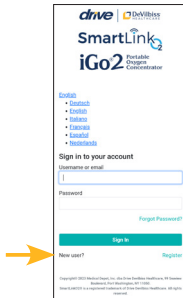


Register Screen

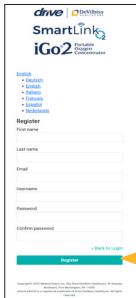

### 5. Pairing

- Select Begin Pairing and follow the pairing wizard steps.
  - If applicable, select "While using the App" for location permissions.
- At Pairing Device screen, move your smartphone toward iGo2 POC screen.
- On Smartphone, confirm iGo2 Serial Number is correct and press Pair. Pairing Successful screen will briefly display.

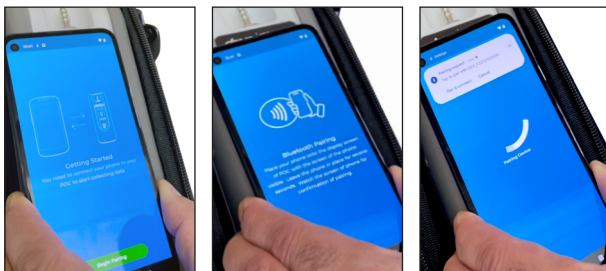


### 6. Viewing and Updating Data

- iGo2 POC information including battery status, power on/off, SmartDose® on/off, prescription setting, oxygen concentration, and breath rate is displayed on Device Status Screen.

**NOTE**-Oxygen concentration indicator displays yellow during warm up and green when start up cycle is complete.


- iGo2 POC information is updated when you open the SmartLinkO2 app. To update after the app is opened, swipe down on the smartphone screen and release. The iGo2 will send updated information to your app.

Device Status

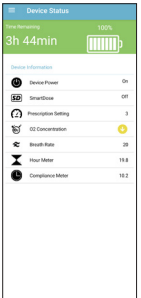

### 7. FAQs

- Select Menu icon on Device Status screen, choose Settings then FAQs for a list of questions and answers.

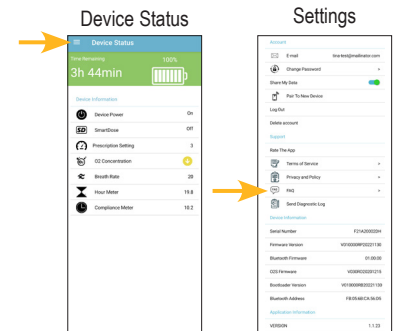

**1. Descargue la aplicación SmartLinkO2 en su teléfono inteligente**



**2. Active Bluetooth® en la configuración de su teléfono inteligente**



**3. Conecte el iGo2® POC**



**4. Abra la aplicación SmartLinkO2**

- Registre su cuenta.
- Ingrese su información, incluida la contraseña deseada, y haga clic en Register (Registrarse) o Sign In (Iniciar sesión) en su cuenta existente.



**5. Emparejar**

- Seleccione Begin Pairing (Comenzar emparejamiento) y siga los pasos del asistente de emparejamiento.
  - Si corresponde, seleccione While using the App (Mientras usa la aplicación) para los permisos de ubicación.
- En la pantalla Pairing Device (Emparejamiento del dispositivo), mueva su teléfono inteligente hacia la pantalla del iGo2 POC.
- En el teléfono inteligente, confirme que el iGo2 Serial Number (Número de serie de iGo2) sea correcto y presione Pair (Emparejar). Se mostrará brevemente la pantalla Pairing Successful (Emparejamiento exitoso).




**6. Visualización y actualización de datos**

- Información de iGo2 POC, incluido el estado de la batería, encendido/apagado, encendido/apagado SmartDose®, la configuración de prescripción, la concentración de oxígeno y la frecuencia respiratoria se muestran en la pantalla Device Status (Estado del dispositivo).

**ⓘ NOTA-** El indicador de concentración de oxígeno muestra amarillo durante el calentamiento y verde cuando se completa el ciclo de inicio.

- La información de iGo2 POC se actualiza cuando abre la aplicación SmartLinkO2. Para actualizar después de abrir la aplicación, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla del teléfono inteligente y suéltelo. El iGo2 enviará información actualizada a su aplicación.

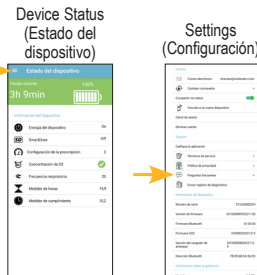

**7. Preguntas frecuentes**

- Seleccione el icono Menu (Menú) en la pantalla Estado del dispositivo, elija Settings (Configuración) y luego FAQs (Preguntas frecuentes) para obtener una lista de preguntas y respuestas.

**1. Téléchargez l'appli SmartLinkO2 sur votre smartphone**



**2. Activer le Bluetooth® dans les paramètres de votre smartphone**




**3. Branchez votre COP iGo2®**




**4. Ouvrez l'appli SmartLinkO2**

- Enregistrez votre compte.
- Entrez vos informations, y compris le mot de passe souhaité, puis cliquez sur Register (S'enregistrer) ou sur Sign In (Connectez-vous) pour vous connecter à votre compte existant.

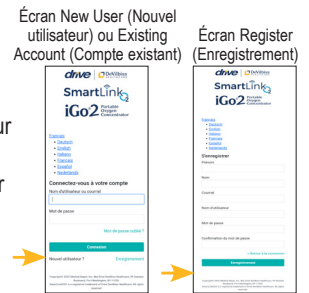

**5. Jumelage**

- Cliquez sur Begin Pairing (Commencer le appariement) et suivez les étapes de l'assistant d'appariement.
  - Le cas échéant, cliquez sur « While using the App » (Pendant l'utilisation de l'appli) pour les autorisations de localisation.
- Sur l'écran d'appariement de l'appareil, déplacez votre smartphone vers l'écran COP iGo2.
- Sur Smartphone, confirmez que le numéro de série iGo2 est correct et appuyez sur Pair (Jumeler). L'écran « Pairing Successful » (Appariement réussi) s'affiche brièvement.

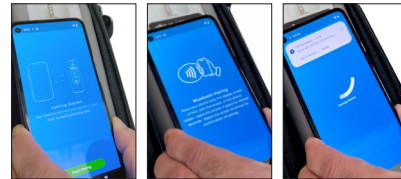


**6. Affichage et mise à jour des données**

- Les informations COP iGo2, y compris l'état de la batterie, la mise sous/hors tension, SmartDose® marche/arrêt, le paramètre de prescription, la concentration en oxygène et la fréquence respiratoire sont affichés sur l'écran Device Status (État de l'appareil).

**ⓘ REMARQUE :** Le voyant de concentration d'oxygène s'affiche en jaune pendant le préchauffage et en vert lorsque le cycle de démarrage est terminé.

- Les informations COP iGo2 sont mises à jour lorsque vous ouvrez l'appli SmartLinkO2. Pour effectuer une mise à jour après l'ouverture de l'appli, balayez l'écran du smartphone vers le bas et relâchez. L'iGo2 enverra des informations mises à jour à votre appli.

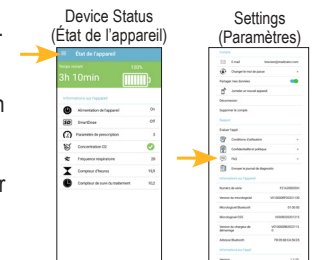

**7. FAQ**

- Cliquez sur l'icône du Menu sur l'écran Device Status (État de l'appareil), cliquez sur Settings (Paramètres), ensuite sur FAQs (FAQ) pour consulter une liste de questions et réponses.